


鼻孔弁（NSV）

『取扱説明書』

NSVは弁の材料として医療用のラテックスゴムを使用しています。（ラテックス）ゴムアレルギーのある方は使用しないで下さい。また、何らかの異常を感じた場合には使用を中止してください。

1）構造

簡易型NSVは左右の鼻孔に入れる左右一対の小さな弁です。構造は図のようになっています。左右の弁筒は連結線でつながれています。ラテックスゴム製の弁は、プラスチック製の弁筒の連結線の側だけについています。

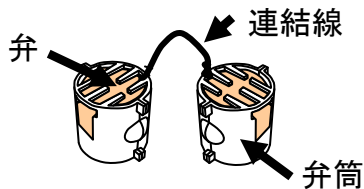

2）装着方法

連結線と弁膜がついている方が外側（鼻に入れたときに、外から見える側）になるように鼻に挿入します。鼻に痛みを感じないように、ゆっくりと指で挿入してください。深く入れる必要はありません。



痛みを感じないように、指でゆっくり挿入します。




深く入れる必要はありません。この程度で充分です。



外から、連結線と、弁が見えます。

3）取外し方法

連結線を指でつまんで引っ張ります。片方ずつ引っ張ると簡単に外れます。

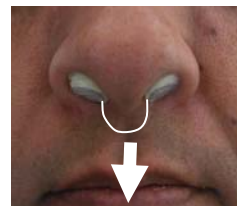

4）鼻孔弁が緩い場合（鼻孔弁のまわりから息がもれたり、鼻から息を吐くと鼻孔弁が抜け落ちそうな場合）

付属のラテックスゴムバンドを適宜弁筒のまわりに巻いて、鼻に適合するよう調整してください。



5）お手入れ

鼻水がついたりして不潔になったときには、コップに水を入れて液体石けん（薬用せっけん 液体ミューズ など）を1滴入れて、しばらく漬けておいてください。その後、水でよくすすいで、乾燥させてお使い下さい。